



QR-activatieservice

Activeer de Medido Medicijnklok nu
zelfstandig via de QR-code!


De activatie van de Medido Medicijnklok start met de QR-code

Als zorgverlener activeer je deze Medido Medicijnklok eenvoudig zelf met de QR-code op het display. Zo werkt het:

Stap 1: aansluiten


Sluit de Medido Medicijnklok aan op de netstroom.

Voor volledige uitleg over het plaatsen van de Medido Medicijnklok, kan de handleiding geraadpleegd worden.

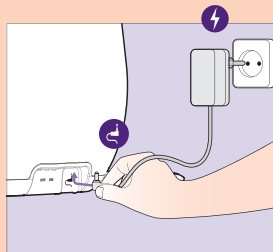

Stap 2: aanzetten

Zet de Medido Medicijnklok aan met de aan/uit-knop aan de achterkant van de Medido Medicijnklok, naast de adapterplug.

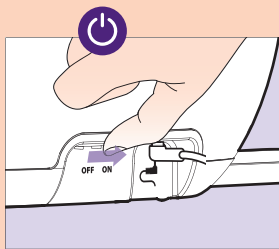

Stap 3: activeren

Nadat je de Medido Medicijnklok hebt aanzet, verschijnt de volgende tekst op het display: "Druk op de knop voor de QR-code. Scan deze code voor activatie!"

- Druk op de knop bovenop de Medido Medicijnklok.
- Scan de QR-code met de camera-app van je smartphone of tablet.
- Volg de instructies om de Medido Medicijnklok online te activeren.



Scan de QR-code om de volledige instructies te bekijken!

